

GYMBELT


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Gymbelt
- Пояс-удлиннитель
- Сетевой адаптер
- Автомобильный адаптер 12V

- [1] Массажер Gymbelt
[2] Панель управления
[3] Регулируемый пояс
[4] Удлинитель для пояса

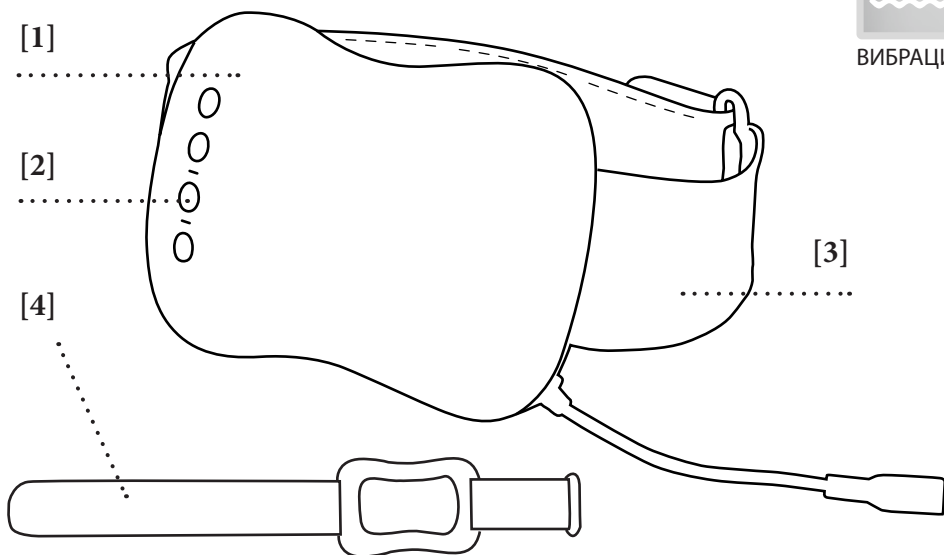

УПРАВЛЕНИЕ

[1] Вкл./выкл.

Используйте данную кнопку для запуска Gymbelt. Массажер начнет работу в автоматическом режиме. Для выключения Gymbelt снова нажмите на данную кнопку.

[2] Режим

Нажмите на данную кнопку, чтобы переключить автоматический режим на ручной. Теперь с помощью кнопок + / - Вы можете самостоятельно регулировать скорость.

[3] +

С помощью данной кнопки Вы можете повысить скорость массажа (только в ручном режиме). В общей сложности имеется 5 скоростей регулировки.


[4] -

Нажмите на данную кнопку для снижения скорости массажа (только в ручном режиме). В общей сложности имеется 5 скоростей регулировки.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Присоедините сетевой адаптер к Gymbelt и к источнику электропитания.

С помощью автомобильного адаптера Вы также можете использовать Gymbelt во время путешествий (не во время поездки на автомобиле!). Просто вставьте автомобильный адаптер в прикуриватель.

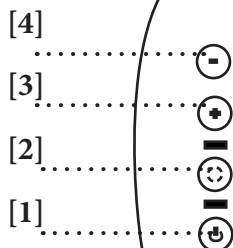

ФУНКЦИИ

ВИБРАЦИЯ

В зависимости от необходимости Gymbelt массирует талию, живот, заднюю часть бедер, руки, бедра или икры.

Наличие практичного расширяющегося пояса не ограничивает применение массажера на указанных частях тела, Вы также можете массировать другие области. Массаж имеет благотворное воздействие, он снимает мышечное напряжение, распрямляет мышечные волокна, стимулирует обмен веществ и высвобождает эндорфины.

С помощью устанавливаемых скоростей и автоматической функции времени Вы определяете интенсивность и продолжительность Вашего массажа. В соответствии с Вашими потребностями Вы можете выбрать медленный или быстрый режим. Вы также можете сами отрегулировать режим массажа по 5 уровням интенсивности. Таким образом, в качестве дополнения к спортивным занятиям Вы можете нарастить мускулатуру и сформировать прекрасный силуэт Вашего тела.

Просто наложите пояс на область, которую хотели бы тренировать, и выберите нужную программу. Простое и понятное управление поможет Вам в этом.

Еще одно преимущество: Благодаря простому использованию, элегантному дизайну и экономичному блоку питания Вы можете наслаждаться массажем дома, в офисе или в дороге.

Важно: Накладывайте пояс только на голую кожу, так как в результате трения между кожей и одеждой может возникнуть раздражение и покраснение.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

С помощью регулярного ухода Вы продлите срок службы Вашего Gymbelt и одновременно обеспечите его надежную работу.

1. Рекомендуемые условия хранения: в сухом месте, защищенном от пыли.
2. Хранить Gymbelt вдали от жидкостей или открытого огня.
3. Протирать массажер сухой мягкой салфеткой.
4. Если Вы не используете Gymbelt, отсоедините его от электросети.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массаж соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или, если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак.

- Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
- Не используйте массажер, управляя автомобилем.
- Не используйте массажер сразу после приема пищи или на голодный желудок.
- Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор, каждый перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни панель управления не работают.	Проверьте присоединение к адаптеру. При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-50 минут.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 17 x 11,5 x 5 см
Объем пояса: 122 см
Масса: 795 г
Номинальная мощность: 19,2 Вт
Напряжение:

- Вход: AC 100-240 В, ~ 50 Гц
- Выход: DC12 В, 1500 мА

Сертификаты:



Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH

Все права защищены.

