

Массажное кресло Кеннеди IV  
KENNEDY IV  
Инструкция по применению

Благодарим Вас за покупку массажного кресла Kennedy 4. Перед началом использования, пожалуйста, прочитайте инструкцию и обращайтесь к ней в будущем, если понадобится.

## Содержание

Особенности кресел класса Люкс.....	2
Меры предосторожности.....	3-7
Комплектация .....	8-9
Сборка и установка .....	10-15
Пульт управления .....	16
Руководство по эксплуатации .....	17-23
Руководство по заземлению .....	24
Технические характеристики .....	25
Устранение неисправностей .....	26
Уход и хранение .....	26

## 09 Устранение неисправностей

Это массажное кресло управляется микро-компьютером и реагирует на перепады напряжения+10- -15, поэтому возможны следующие неполадки::

Ситуация	Решение
Массажное кресло не работает даже если оно было подключено к источнику питания.	1. Проверьте вставлен ли электрический кабель в электрическую розетку. 2. Убедитесь, что выключатель питания в положении "I".
Во время использования, пульт ДУ работает, а кресло нет.	При длительном использовании, кресло могло перегреться. Оно автоматически вернется к обычному режиму работы после охлаждения. Пожалуйста, выключите его на 30-50 минут.
Во время использования, и кресло и пульт ДУ не работают.	Отключите прибор от питания и снова включите.

Если неисправность невозможно устранить, пожалуйста, проверьте гарантийный талон и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 10 Техническая поддержка

- Избегайте воды и жидких моющих средств при уходе за изделием.
- По возможности не трите, не царапайте поверхность кресла.
- Во время использования, нажимайте на кнопки мягко, не допускайте повреждения пульта ДУ твердыми предметами.
- Отключайте кресло от источника питания, если не пользуетесь им долгое время.
- Рекомендуемая длительность массажа 30 минут. Не рекомендуется превышать этот интервал.

## 08 Технические характеристики

Description		Specification
Тип		Массажное кресло
Модель		Кеннеди IV
Входное напряжение		220-240В
Частота переменного тока		50/60 Гц
Потребляемая мощность		300 Вт
Таймер		15 Минут
Максимальное время		30 Минут
Габариты (Д/Ш/В)		Сиденье: 127.5 x 76 x 69 см
		Спинка: 137.5 x 76.5 x 58.5 см
		Боковая панель: 97 x 63.5 x 37 см
Вес (кг)	Брутто	Сиденье: 68 / Боковая панель: 22 / Спинка: 37
	Нетто	Сиденье: 58 / Боковая панель: 20 / Спинка: 45
Длина провода		Длина провода пульта ДУ: 1.2 м
		Длина сетевого провода: 2.1 м
Условия использования		Температура воздуха: 20-60 С
		Относительная влажность воздуха: 30-85%
Условия хранения		Температура хранения: 20-60 С
		Относительная влажность воздуха: 30-85%
Защитные функции		Оснащен системой защиты от перепадов напряжения и перегрева

## 01 Особенности кресел класса люкс

- Управление массажным креслом Кеннеди IV осуществляется с помощью микрокомпьютера, который обеспечивает множество видов массажа и его комбинаций: разминающий, шведский, постукивающий, точечный шиатсу, похлопывающий, роликовый, растягивающий, роликовый для ног, вибрационный и компрессионный массаж. Во время массажа стимулируются биологически активные точки, что дает возможность эффективно снять усталость, улучшить обмен веществ и стимулировать кровообращение.
- Инновационный 3D робот, управляемый микрокомпьютером, обеспечивает непревзойденную точность и тщательность массажа, воздействуя на биологически активные точки спины.
- Плавные формы спинки кресла повторяют изгиб спины человека, обеспечивая наиболее эффективный и комфортный массаж.
- Набор из 8 автоматических программ и различные виды режимов, настраиваемых вручную, позволяют удовлетворить самые взыскательные требования пользователей.
- Полный и комплексный массаж тела человека, захватывающий шею, плечи, руки, спину, поясницу, ноги и ступни.
- Роскошный и сияющий вид динамика, позволяющий окружить себя музыкой во время массажа, для создания максимально расслабляющей и удобной атмосферы.
- Уникальный эффективный роликовый массаж ступней.
- Дополнительный подогрев в области поясницы и функция вибрации сиденья.
- Автоматическое сканирование или ручная настройка уровня высоты при массаже спины.
- Угол наклона спинки кресла и подножки может быть отрегулирован одновременно или по отдельности: спинка кресла от 115 до 160 градусов, подножка от 0 до 90 градусов. Функция "невесомости", при которой ноги и голова находятся на одном уровне, активируется одним нажатием кнопки.
- Таймер регулируется в соответствии с желаемым интервалом времени для программы массажа
- Жидкокристаллическим дисплеем удобно пользоваться даже в темноте.
- Работа кресла контролируется продвинутым микропроцессором, что обеспечивает неизменное качество и отличные эксплуатационные характеристики.

## 02 Меры предосторожности

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Вовремя использования массажного кресла необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включающие в себя:

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования кресла.

### ОПАСНОСТЬ - чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Всегда отключайте массажное кресло от питания сразу же после использования и перед чисткой.
- Никогда не пользуйтесь булавками и другим крепежом из металла одновременно с данным прибором.
- Внимательно проверяйте покрытие кресла перед каждым использованием. Обратитесь в сервисный центр при любых изменениях, например, образовании пузырей, шелушении и растрескивании покрытия.
- Установите в сухом месте, не допускайте использования в сырых и влажных условиях.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ- для того, чтобы снизить риск возгорания, пожара, поражения электрическим током и получения травмы:

- Прочитайте инструкцию перед использованием.
- Не оставляйте массажное кресло без присмотра не отключенным от сети питания. Выньте вилку из розетки, когда прибор не используется и перед установкой или снятием частей.
- Никогда не оставляйте без присмотра работающий прибор если он находится рядом с, или используется, детьми или людьми с ограниченными возможностями. Держите детей подальше от отклоняющейся спинки кресла или подножки.
- Используйте кресло только по его прямому назначению, в соответствии с данной инструкцией.
- В случае повреждения шнура питания или вилки, некорректной работы прибора, падения или повреждения, контакта с водой, использование кресла запрещено. Необходимо обратиться в Сервисный центр.
- Держите шнур электропитания на расстоянии от нагреваемых поверхностей.
- Никогда не пользуйтесь массажным креслом, если вентиляционные отверстия для выхода воздуха заблокированы.

## 07 Руководство по заземлению

Данное изделие должно быть заземлено. В случае возникновения неисправностей

или поломки, заземление предоставляет путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что позволяет снизить риск поражения электрическим током. Данный продукт имеет в комплекте заземляющее оборудование: шнур с

заземляющим проводником и вилкой заземления. Вилку необходимо подключить к соответствующей розетке, которая была установлена и заземлена в соответствии

с местными нормами и правилами.

Неправильное подключение заземляющего оборудования может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к профессиональному электрику или

сервисному технику, если поставляемая вилка не подходит к розетке, установка подходящей розетки должна быть произведена квалифицированным электриком. Этот продукт предназначен для использования в электрической сети с номинальным

напряжением 230В и имеет вилку заземления, которая выглядит как показанная ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, которая имеет такую же конфигурацию, что и вилка. С данным продуктом не следует использовать различные переходники.



### **38. FOOT REST**воздушно-компрессионный массаж “отдых ног”

Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем ног. Доступно 5 уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим ритмичного массажа ног. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку еще раз.

### **Finish Operating** окончание работы

Нажмите на кнопку “ON/OFF” (вкл./выкл.) после использования. Массажные ролики вернуться в исходное положение, затем переключите тумблер питания в положение “O”, расположенный под креслом и отсоедините шнур электропитания от розетки.

- Чтобы отключить прибор, переведите все переключатели в положение выключено, затем отсоедините шнур электропитания от розетки.
- Не вставайте на или в массажное кресло. Начинайте использование, сидя в кресле.
- Изделие не предназначено для использования детьми и людьми нарушениями органов чувств, с ограниченными физическими, умственными возможностями. Также прибором не могут пользоваться люди с недостаточным уровнем опыта и знаний о данном приборе, пока они не получают их под руководством человека, ответственного за их безопасность.
- Следите, чтобы дети не играли с креслом.
- Температура нагрева может быть достаточно высока, чтобы вызвать ожоги, поэтому прибор не может использоваться детьми, инвалидами, спящими людьми и лицами в бессознательном состоянии. Проверьте чувствительность вашей кожи к температуре нагрева перед началом использования.
- В случае ненадлежащего использования может возникнуть возгорание.
- Избегайте острых предметов.
- Держите детей подальше от раздвигающейся подножки для ног) и др. подобных частей кресла).
- НЕ МОЧИТЬ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУЛАВКАМИ.
- НЕ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ КРЕСЛА.
- Присоединять прибор только к заземленной электрической розетке. Прочтите руководство по заземлению.

## **СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Это массажное кресло предназначено только для домашнего использования.

### **1. Среда использования**

- Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности или пыли, так как это может привести к короткому замыканию или удару электрическим током.
- Не используйте массажное кресло в помещениях с температурой выше 40°C и выше.
- Не подвергайте массажное кресло воздействию обогревателей, каминов или прямого солнечного света.
- Установите массажное кресло на ровную, нескользящую поверхность
- Массажное кресло предназначено для домашнего использования и не может использоваться в коммерческих целях.



### Предупреждение

- Это массажное кресло может использоваться только в помещении.
- Если кресло находится в холодной комнате, не рекомендуется резко повышать температуру в комнате. Лучше постепенно поднимать температуру до нормального уровня.
- Если массажное кресло хранилось в холодном месте, а затем оказалось в теплой среде, рекомендуется подождать один час перед использованием. Это необходимо, чтобы избежать образования конденсата на деталях кресла, что может привести к короткому замыканию в случае использования кресла.

## 2. Меры безопасности

- Не пользуйтесь массажным креслом, пока не ознакомитесь внимательно с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не пользуйтесь массажным креслом без сиденья или обивки. Это может привести к повреждениям или возникновению неисправностей.
- Не пользуйтесь массажным креслом в комбинации с другими терапевтическими приборами, такими как электрическое одеяло и тп, тк это может привести к снижению эффективности и поломкам.
- Не пользуйтесь массажным креслом за час до и после еды, тк это может привести к тошноте и неприятным ощущениям.
- Не позволяйте детям и собакам играть вблизи массажного прибора, особенно за спинкой и под сиденьем и подножкой.
- Не пользуйтесь массажным креслом если у вас влажное тело.
- Не пользуйтесь прибором, если у вас влажные руки.
- Не рекомендуется массаж более 15 минут.
- Не выполняйте непрерывный массаж одной точки вашего тела более, чем 5 минут. Излишнее воздействие на определенные точки может иметь обратныйот положительногоэффект.
- Не помещайте руки и ноги между работающими роликами во время использования, тк это может привести к травмам.
- В случае какого-либо дискомфорта, немедленно прервите массаж.
- Этот прибор не предназначен для самолечения, лечение должно осуществляться под контролем доктора.
- Пожалуйста ,проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если у вас имеются какие-либо заболевания, перед началом использования массажного кресла. Пожалуйста, не используйте прибор, если испытываете недомогание.

## 32. STRENGTH (сила массажа)

Кнопка настройки силы массажа в режиме разминающий массаж.

Во время работы в режиме разминающий массаж, каждое нажатие на эту кнопку будет менять интервал скорости и силы массажа в циклической последовательности "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5".

## Настройки воздушно-компрессионного массажа

### 33. INTENSITY (интенсивность воздушно-компрессионного массажа)

Кнопка настройки интенсивности давления воздухапри воздушно-компрессионноммассаже, 5 уровней интенсивности могут быть выбраны. Во время работы в режиме воздушно-компрессионный массаж, каждое нажатие на эту кнопку будет менять интенсивность давления воздуха вциклической последовательности "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5".

### 34. FULL AIR (воздушно-компрессионный массаж всего тела)

Кнопка включения/выключения воздушно-компрессионного массажа всего тела - доступно 5 уровней интенсивности. Нажмите кнопку, чтобы активировать ритмичный массаж всего тела в автоматическом режиме. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы прекратить работу программы.

### 35. SHOULDER (воздушно-компрессионный массаж плеч и верхней части спины)

Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем плеч и верхней части спины. Доступно 5 уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать работу программы. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку еще раз.

### 36. BACK & SEAT (воздушно-компрессионный массаж спины и ягодиц)

Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем спины и ягодиц. Доступно 5 уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать работу программы в ритмичном режиме. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку еще раз.

### 37. HAND REST (воздушно-компрессионный массажрук)

Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем рук. Доступно 5 уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим ритмичного массажа рук. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку еще раз.

Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим 1, похлопывающий массаж на средней скорости. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. Нажмите на кнопку в третий раз, чтобы завершить работу в режиме похлопывающего массажа.

### 27. ROLLING (роликовый массаж)

Кнопка запуска/остановки роликового массажа - может быть выбрано 3 уровня ширины расположения массирующих роликов.

Во время работы кресла в режиме 2, похлопывающий массаж, нажмите на кнопку, чтобы активировать режим роликового массажа спины. Повторное нажатие на кнопку прекратит работу в режиме роликового массажа. Чтобы активировать эту функцию напрямую, нажмите на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.

**Примечание:** Эта функция не может выполнять режим точечный массаж - SPOT.

### 28. STRETCHING (растягивающий массаж)

Кнопка запуска/остановки роликового массажа - может быть выбрано 3 уровня ширины расположения массирующих роликов.

Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим растягивающего массажа всей спины, средней ширины. Повторное нажатие приведет к прекращению работы этого режима.

### 29. SPOT/PARTIAL местный/частичный массаж

Местный или частичный массаж спины

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать локальный местный массаж, в то же время прежний режим массажа продолжит работу в последнем положении. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы активировать режим частичного массажа.

**Примечание:** При включении режима частичного массажа, последняя позиция будет принята в качестве центральной, и массаж продолжится в области радиусом примерно 8 см от этой позиции.

### 30. WIDTH (ширина)

Кнопка выбора ширины площади воздействия в режимах постукивающий, похлопывающий, шиацу и роликовый массаж.

Во время работы кресла в режиме постукивающий, похлопывающий, шиацу и роликовый массаж, каждое нажатие на кнопку будет менять ширину в циклической последовательности -узкая, средняя, широкая.

### 31. SPEED (скорость)

Кнопка регулирования скорости для режимов постукивающий, похлопывающий, шведский или шиацу, каждое нажатие на кнопку будет менять скорость массажа в циклической последовательности "Lv1 > Lv2 > Lv3 >Lv4 > Lv5"

### 3. Людям с заболеваниями

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если:

- вынаходитесь под медицинским наблюдением.
- у вас есть заболевания позвоночника или вы перенесли травму позвоночника.
- вы имеете проблемы со спиной.
- у вас диабет, остеопороз, или нарушения органов чувств.
- у вас ревматизм, подагра или искривления пальцев ног.
- у вас установлен кардиостимулятор или другое электронное медицинское оборудование.
- вы возможно беременны.
- у вас тромбофлебит или тромбоз.
- вы имеете повышенный риск развития тромбов.
- вы недавно перенесли хирургическое вмешательство.



#### Предостережение

Изделие не предназначено для использования детьми и людьми нарушениями органов чувств, с ограниченными физическими, умственными возможностями. Также прибором не могут пользоваться люди с недостаточным уровнем опыта и знаний о данном приборе, пока они не получат их под руководством человека, ответственного за их безопасность.

- Следите, чтобы дети не играли с креслом.
- Избегайте пользоваться креслом, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения.
- Не используйте массажные ролики непосредственно для массажа головы, коленей, локтевых и коленных суставов, туловища и брюшной полости.
- Если ваши ноги или ступни соскользнули с подножки во время массажа, не вставляйте их обратно, так как это может привести к травмам.
- Немедленно отсоедините шнур электропитания от розетки, если случайно пролили жидкость на поверхность кресла. Не допускайте включения/выключения прибора мокрыми руками.
- Не трогайте шнур питания и не включайте массажное кресло при повреждении шнура питания, так как это может привести к короткому замыканию или удару током

#### **4. Обстоятельства, при которых массажное кресло не может использоваться**

Пожалуйста, выключите переключатель питания и отсоедините шнур питания от электросети в следующих случаях:

- Если вода случайно пролилась на кресло. Это может привести к удару электрическим током или сбоем в работе.
- Если обивка кресла повреждена и видны внутренние детали кресла.
- Если вы почувствовали боль или дискомфорт во время массажа, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с доктором.
- Если вы обнаружили сбой в работе или любые отклонения во время использования.
- Если произошел сбой в питании, так как возможны травмы в случае неожиданного восстановления питания.
- В случае грозы.

#### **5. Сборка и ремонт массажного кресла**

● Не отсоединяйте обивку спинки кресла. Прикосновение к внутренним компонентам может привести к сбою в работе или к поражению электрическим током.

● Массажное кресло должно обслуживаться в специализированном сервисном центре. Не пытайтесь самостоятельно отсоединять детали или ремонтировать кресло.

#### **6. Шнур электропитания и вилка**

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному в технических характеристиках данного кресла.
- Не включайте/не выключайте шнур электропитания мокрыми руками. Это может привести к сбою в работе и поражению электрическим током.
- При отключении электропитания, держитесь за вилку, а не за провод.
- Хотя работа массажного кресла прекращается с выключением таймера автоматически, не забывайте выключать переключатель питания после использования.
- Следите за тем, чтобы шнур электропитания не находился под креслом или любым другим тяжелым предметом
- Не размещайте шнур электропитания вокруг массажного кресла, так как это может привести к повреждению провода, пожару или поражению электрическим током.
- Не пользуйтесь креслом, если провод поврежден, не используйте удлинитель для подключения кресла.
- Не пользуйтесь креслом, если повреждена электрическая вилка.
- Если провод электропитания поврежден, он подлежит замене в специализированном сервисном центре

#### **Ручная установка массажных программ**

##### **22. KNEADING (разминающий массаж)**

Кнопка запуска/остановки режима разминающего массажа -возможен выбор 5 уровней скорости. Нажмите на кнопку ,чтобы активировать ритмический режим 1 , массаж средней силы. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. Нажмите на кнопку третийраз, чтобы завершить работу в режиме разминающего массажа и переключиться в режим 1 - Шведский массаж.

##### **23. SWEDISH (шведский массаж)**

Кнопка запуска/остановки режима Шведский массаж - возможен выбор 5 уровней скорости.

Во время работы в режиме 2, включен режим разминающий массаж. Для активации шведского массажа спины на средней скорости, режим 1, нажмите кнопку шведский массаж. Повторное нажатие кнопки активирует 2 режим шведского массажа. При третьем нажатии произойдет отключение функции шведский массаж. Если вы хотите активировать режим шведского массажа напрямую, необходимо нажать на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.

##### **24. TAPPING (постукивающий массаж)**

Кнопка запуска/остановки режима постукивающий массаж - 3 уровня ширины площади постукивания, 5 уровней скорости.

Нажмите на кнопку ,чтобы активировать режим 1, постукивающий массаж на средней скорости. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. Нажмите на кнопку третийраз, чтобы завершить работу в режиме постукивающего массажа.

##### **25. SHIATSU (Шиатсу, точечный массаж)**

Кнопка запуска/остановки режима постукивающий массаж - 3 уровня ширины площади массажа, может быть выбрано 5уровней скорости.

Во время работы в режиме 2, постукивающий массаж, нажмите кнопку шиатсу, чтобы активировать точечный массаж в режиме 1, на средней скорости. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. Нажмите на кнопку третийраз, чтобы завершить работу в режиме шиатсу. Для активации режима напрямую, нажмите на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.

##### **26. CLAPPING (похлопывающий массаж)**

Кнопка запуска/остановки режима похлопывающий массаж - 3 уровня ширины площади массажа, может быть выбрано 5 уровней скорости.

12. DEEP TISSUE (ГЛУБОКИЙ)
13. THAI (ТАЙСКИЙ)
14. CALM (УСПОКАИВАЮЩИЙ)
15. RECOVERY (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ)
16. CHINESE (КИТАЙСКИЙ)
17. SHOULDER (массаж плеч)
18. LUMBAR (массаж поясницы)

**Примечание:** LUMBAR массаж противопоказан пожилым людям.

#### 19. FOOT ROLL (роликовый массаж ступней)

Кнопка включения/выключения роликового массажа ступней.

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать ритмичный роликовый массаж ступней, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить массаж ступней.

**Примечание:** Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку также включает и выключает массаж ступней.

#### 20. VIBRATION (вибрация)

Кнопка включения/выключения вибрации.

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать ритмичную вибрацию сиденья, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить вибрацию сиденья.

**Примечание:** Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку также включает и выключает вибрацию


#### 21. HEAT (подогрев)

Кнопка включения/выключения подогрева поясничной зоны.

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать функцию подогрева, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить функцию подогрева.


**Примечание:** Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку включает и выключает подогрев поясничной зоны.

## 03 Комплектация

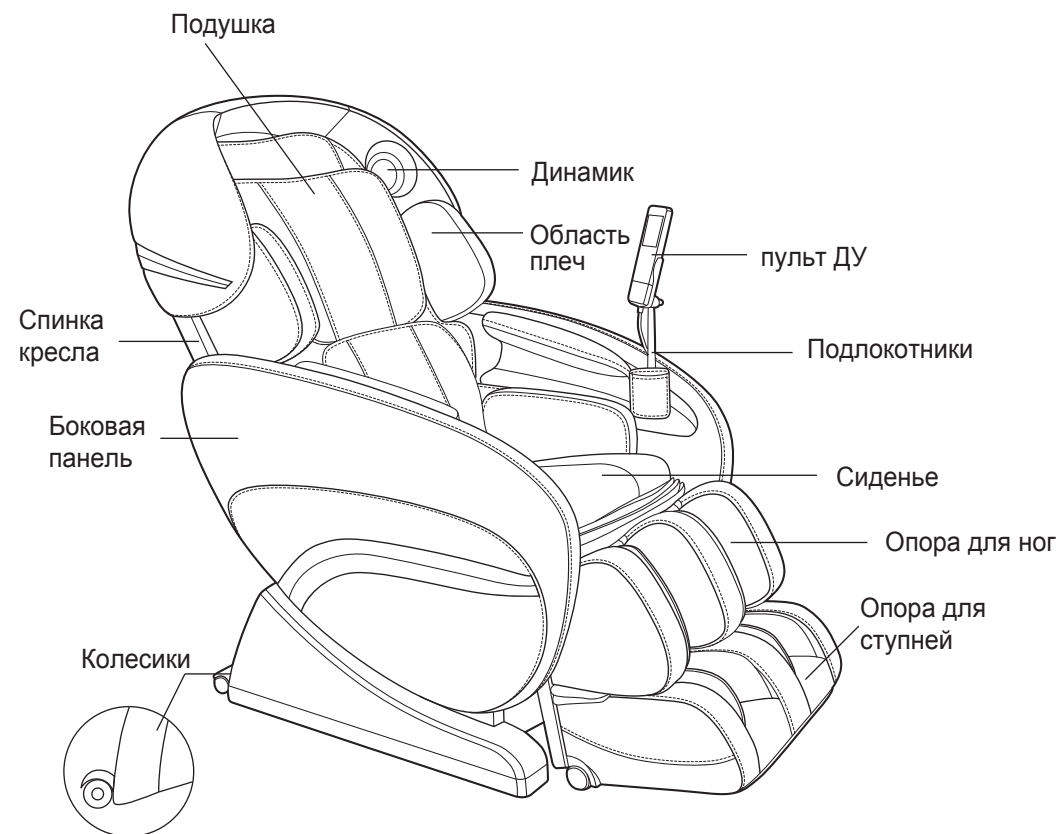



## Массажное кресло

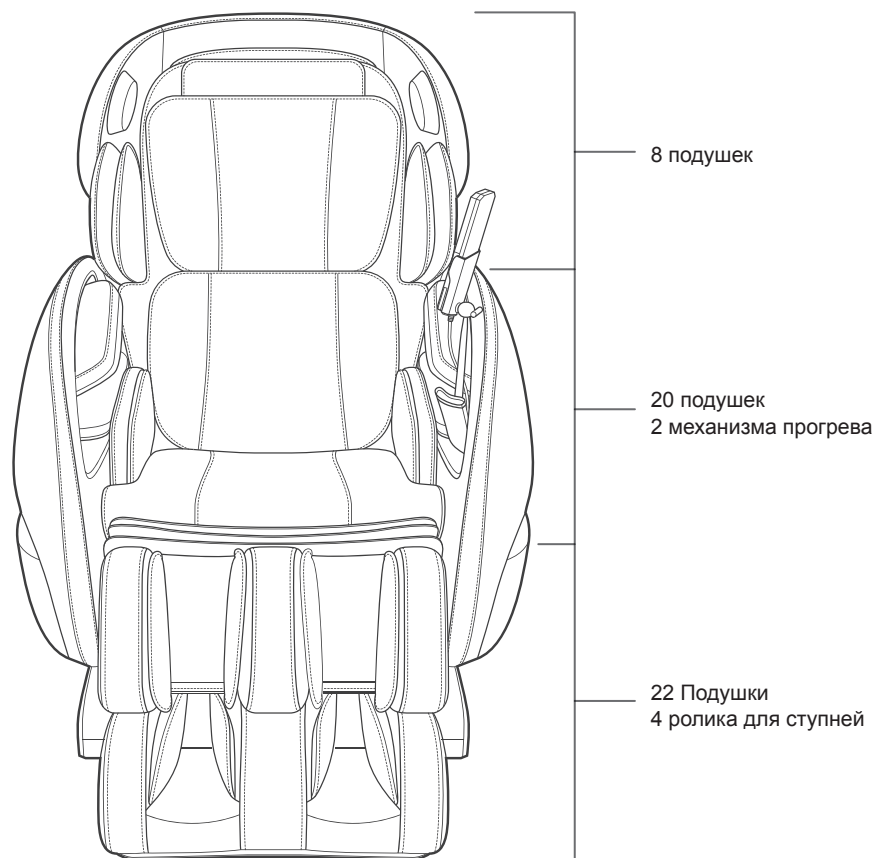

### 5. Кнопка управления углом наклона подножки.

Кнопка для регулировки наклона подножки кресла. Нажмите на кнопки, чтобы регулировать угол наклона подножки до удобного вам положения. Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить движение подножки.

### » Кнопка регулировки длины подножки

Нажимая непрерывно на эти 2 кнопки можно отрегулировать удобную Вам длину подножки.

### 6. INCLINE/RECLINE (наклон/поднятие)

Кнопки регулировки угла наклона.

Нажатие на кнопки позволяет отрегулировать угол наклона. Нажмите один раз, чтобы установить спинку кресла и подножку в удобное для Вас положение.

### 7. Кнопка регулировки высоты спинки кресла

Нажимайте кнопку  $\updownarrow$  чтобы установить точную регулировку роста в течение 10 секунд после того, как раздался сигнал, если автоматическая система сканирования роста не определила желаемый вами размер. Массажный ролик будет двигаться вверх и вниз, отпустите кнопку, как только ролик достигнет желаемого положения.

### 8. 3D ADJUSTMENT (настройка 3D массажа)

Нажимайте на кнопку "+" чтобы настроить 3D массаж, ролик будет двигаться вперед, реагируя на каждое нажатие, нажатие 5 раз обеспечит самое выступающее положение. Нажатие "-" кнопки постепенно вернет ролик в первоначальное положение.

## Автоматические программы для массажа всего тела

Если одна из 10 автоматических программ активирована, кресло автоматически определяет высоту плеч и сканирует изгиб тела. Пользователь также может вручную установить удобное для себя положение для массажа.

### 9. REFRESH (ОБНОВЛЕНИЕ)

### 10. SLUMBER (СОН)

### 11. BALINESE (БАЛИ)

## 06 Руководство по эксплуатации

Подключите шнур питания в электрическую розетку и установите переключатель в позицию "I". Сейчас кресло находится в режиме ожидания, кнопка ON/OFF (вкл./выкл.) мигает, что означает, что электричество подключено.

В режиме ожидания рабочими кнопками являются ON/OFF(вкл./выкл.), Pause(пауза),

Legrest Adjustment Buttons(кнопка регулировки длины подножки), Chair Recline/Restore(отклонение спинки и подножки кресла/возврат в исходное положение).

### Кнопки управления массажным креслом

#### 1. ON/OFF (Вкл./Выкл.)

Кнопка включения/выключения кресла

Нажмите на кнопку, чтобы на экране появилась надпись ON (вкл.) Нажмите любую кнопку массажных программ, чтобы начать массаж. Это активирует работу таймера. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить массаж, и массажное кресло вернется в исходное положение.

#### 2. TIMER (таймер)

Кнопка контроля времени массажа

Когда функция массажа активирована, таймер установлен на 15 минут. При каждом нажатии на эту кнопку, временной интервал будет изменяться в циклической последовательности "20>25>30>5>10>15>20" минут.

Примечание: Если нажать и удерживать кнопку таймера в течение 5 секунд, произойдет отключение звука контроллера. Чтобы включить звук, необходимо снова нажать на кнопку в течение 5 секунд.

#### 3. PAUSE (пауза)

Нажмите на кнопку, чтобы приостановить функцию массажа и работу таймера. В режиме пауза кнопка будет мигать. Повторное нажатие возобновит массаж и работу таймера.

#### 4. ZERO-G (функция невесомости)


Нажмите на кнопку, чтобы активировать функцию невесомости, нажмите еще раз, чтобы вернуться к обычному режиму.

**Примечание:** Кнопка ZERO-G недоступна в режимах автоматических программ. Slumber(сон) и Thai( тайский массаж).

## 04 Сборка и установка

**Примечание 1:** Убедитесь в наличии достаточного места перед началом установки. Когда спинка кресла опускается, а подножка поднимается, не менее 80 см должно быть впереди и сзади кресла.

Во избежание повреждения полового покрытия, рекомендуется устанавливать кресло на коврик.

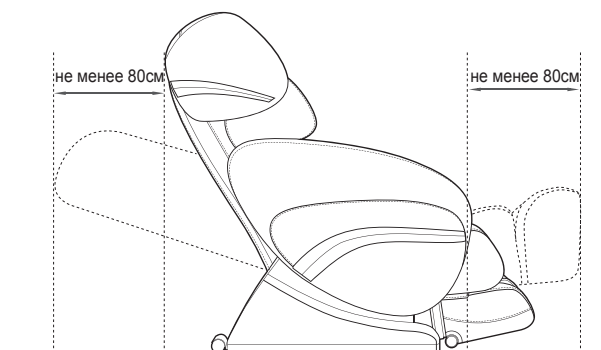

**Примечание 2:** При подсоединении частей массажного кресла необходимо отключить кресло от электрической сети.


**Примечание 3:** При соединении шланга подачи воздуха, ориентируйтесь по цветам.

#### Шаг 1:

Извлеките детали массажного кресла из коробки.

#### Шаг 2:


Соедините шланг подачи воздуха со стороны боковых панелей и сиденья между собой, как это показано на рисунке 1.

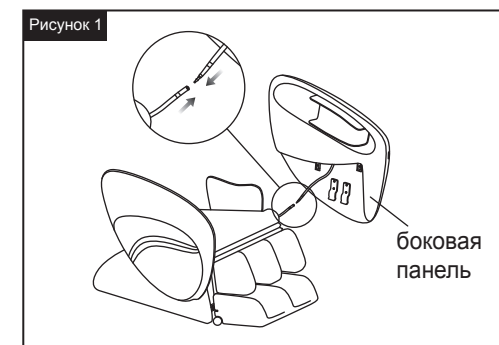




### Шаг 3: Установка боковой панели

1) Вставьте боковую панель под углом 90 градусов вдоль крюка к держателю (на сидении), как это показано на картинке 2

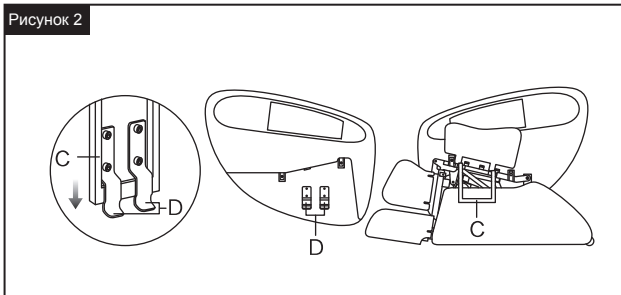

2) Выровняйте боковую панель, чтобы отверстия для винтов совпали, закрепите при помощи винтов, как это показано на рисунке 3.

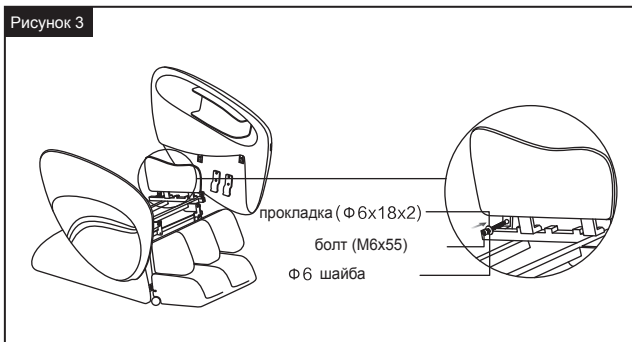

**Примечание:** Будьте осторожны, чтобы избежать появления царапин на изделии во время установки.

### Шаг 4:

Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить вторую панель.

## 05 Пульт Дистанционного Управления (ДУ)





## Перемещение кресла


1. Установите длину подножки в начальное положение.
2. Наклоните кресло под углом 45 градусов. Переместите кресло, используя колесики в качестве опоры.

### Примечание:

- Всегда возвращайте подножку в начальное положение, и устанавливайте минимальную длину перед тем, как перемещать кресло, чтобы избежать повреждений.
- Не передвигайте кресло, если в нем кто-то сидит.
- Положите коврик на пол и аккуратно катите кресло по нему, чтобы не повредить пол.

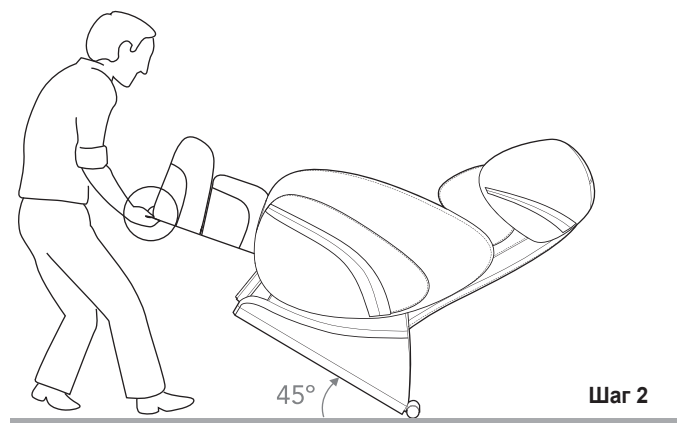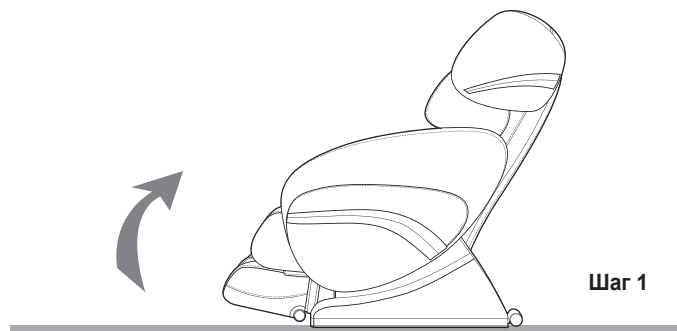


**Шаг 5:** Установите держатель пульта ДУ и поместите его на кронштейн, закрепите шурупами, как показано на рисунке 4.

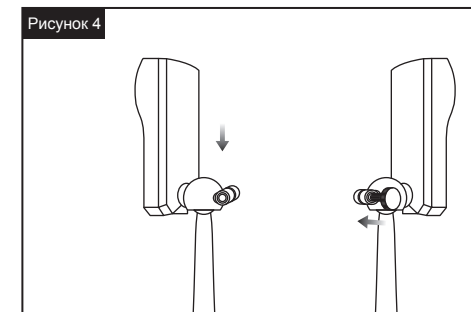


### Шаг 6:

С помощью бокорезов откусите кабельную стяжку, которая связывает стопор спинки кресла и снимите упаковку с силового привода спинки кресла (картинка 5).

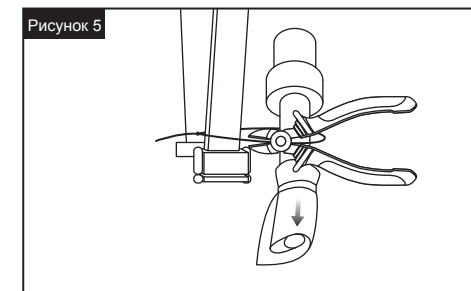

### Шаг 7: Установите спинку кресла


Приподнимите спинку, затем опустите ее так, чтобы она вошла в крепежные скобы сиденья. Тщательно закрепите болты с плоской головкой (А) с обеих сторон сиденья (В), как это показано на картинке 6.  
А. Болт с плоской головкой (на спинке кресла)  
В. Крепежные скобы (на сиденье)

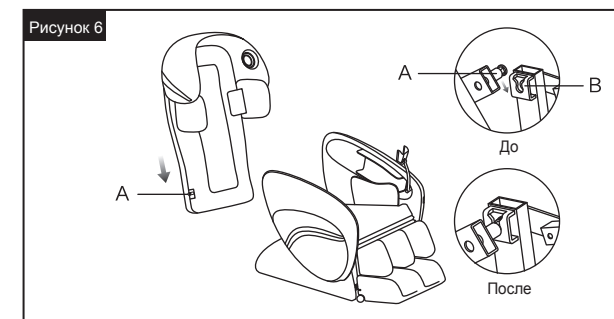

### Шаг 8:


Соедините штангу (А) и U образную вилку привода спинки (В) шпилькой с плоской головкой (С) и зафиксируйте соединение с помощью шплинта (D), затем соедините шланг подачи воздуха и аудио провод с левой и правой сторон, как показано на рисунке 7.

- А. Штанга
- В. U образная вилка привода спинки
- С. Шпилька с плоской головкой
- Д. Фиксирующий шплинт

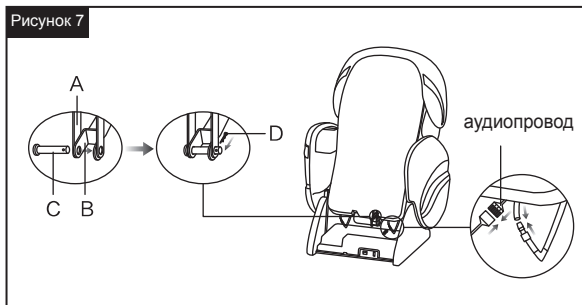


### Шаг 9:

Вставьте штекеры в соответствующие разъемы сиденья, как показано на рисунке 8.

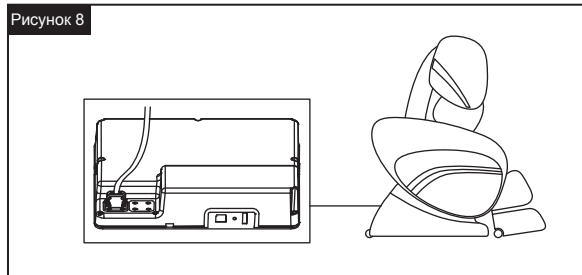


**Шаг 10:** Установите подкладку спинки и подушку как показано на рисунке 9.

- 1) Присоедините подкладку спинки и подушку при помощи липучек.
- 2) Присоедините подкладку спинки кресла при помощи молнии и застежки-липучки.

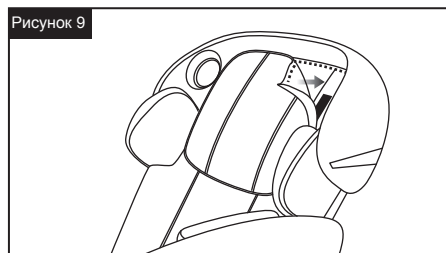

### Шаг 11:

Вставьте штекеры в соответствующие разъемы, как показано на рисунке 10.

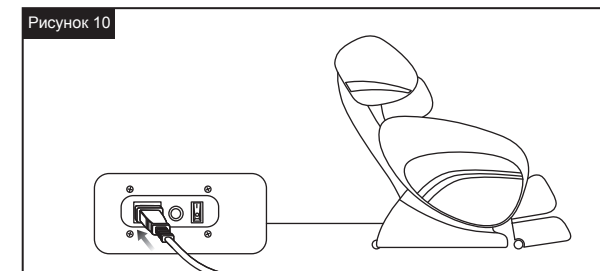

**Шаг 12:** Установка вставки, регулирующего силу массажа спины. Если вам необходим сильный массаж, снимите вставку, если вам нужно сделать массаж более мягким, закрепите вставку на спинке кресла, это уменьшит силу массажа.

